

VAPORIZADORA CONTINUA

MODELO TPS-B-350 Y TPS-B-500

DESCRIPCIÓN GENERAL

Mini Pad-Steam de laboratorio a la continua con foulard de impregnación y cámara de vaporizado para desarrollo de colores, productos y procesos en pruebas más largas, conforme procesos continuos de producción. Disponible con rolos de ancho 350mm o 500mm.

Posee control de temperatura hasta 110°C y control de velocidad de transporte hasta 2 m/min.

Ajuste de presión de los rolos de foulard por medio de sistema neumático.


Un desenrollador de tela en la entrada, y un enrollador en la salida con sistema neumático de embrague para ajuste de tensión de la prueba.

Cámara de vaporizado de 1 - 3 metros contenido con vapor directo e indirecto (baño-maría), y resistencia arriba del baño-maría para calentar el vapor hasta 105°C. Entrada y techo calentados para evitar gotas de condensado. Sello de agua en la salida de la cámara.



DATOS TÉCNICOS - MODELO	TPS-B-350	Y	TPS-B-500
Ancho de rolos	350 mm		500 mm
Ancho útil de rolos (prueba)	300 mm		450 mm
Temperatura de la vaporizadora	hasta 110 °C		hasta 110 °C
Velocidad	0,2 - 2,0 m/min		0,2 - 2,0 m/min
Contenido de prueba en cámara	1 - 3 m		1 - 3 m
Tiempo de permanencia	30 s - 15 min		30 s - 15 min
Volumen de tina de impregnación	0,5 - 1,5 litros		0,8 - 2 litros
Potencia (aprox.) / Voltaje	4,5 kW / 3 x 220/380 V		4,5 kW / 3 x 220/380 V

Dimensiones	L 130 x P 67 x A 105 cm	L 130 x P 82 x A 105 cm
Peso (aprox.)	250 - 500 kg	280 - 550 kg

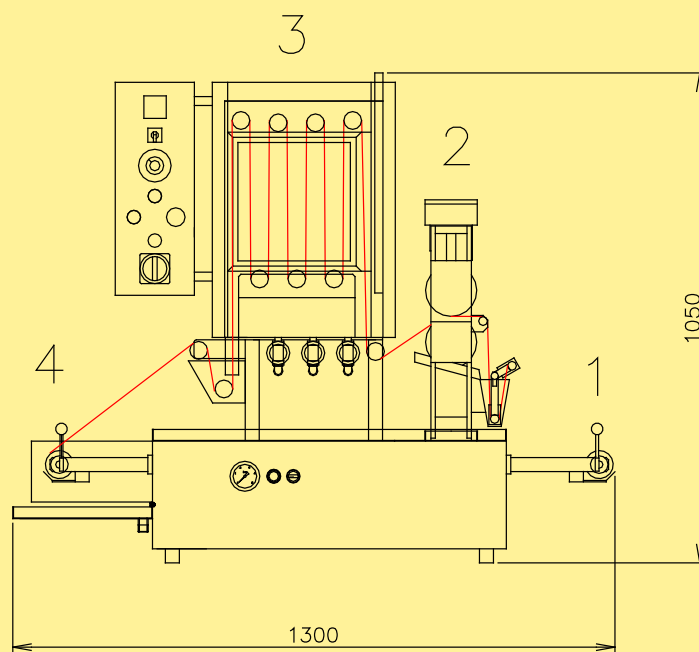

Werner Mathis AG

Rütisbergstrasse 3
 CH-8156 Oberhasli/Zürich, Switzerland
 Telefon 41(0)44-852 5050
 Telefax 41(0)44-850 6707
 E-Mail info@mathisag.com
 Homepage www.mathisag.com

Aparelhos de Laboratório Mathis Ltda.

Estrada dos Estudantes, 261
 06707-050 Cotia - SP, Brasil
 Tel: 55 (0)11 3883-6777
 Fax: 55 (0)11 3883-6750
 E-mail: mathis@mathis.com.br
 Site: www.mathis.com.br